

alethia™

Group A Streptococcus

TESTVERFAHREN Kurzanleitung



1. Probennahme:


Die Rachenabstrichproben sollten in Übereinstimmung mit den Verfahren der jeweiligen Einrichtung zur Entnahme klinischer Proben für die Kultivierung von *Streptococcus* Gruppe A entnommen werden.



2. Brechen Sie für den Alethia™ Test einen Tupfer der Abstrichprobe am Stiel ab.




3. Geben Sie die Abstrichprobe in das Gefäß für die Probenvorbereitung. Schließen Sie das Gefäß und vortexen es für 10 Sekunden.

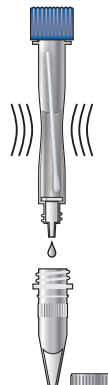


4. Entfernen Sie den unteren Deckel und drücken Sie 5-10 Tropfen der Probe in das Gefäß für die Hitzebehandlung.



5. Erhitzen Sie das Gefäß bei 95 °C für 10 Minuten. Vortexen Sie dieses anschließend für 10 Sekunden.

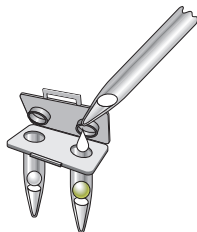

6. Überführen Sie 50 µL der hitzebehandelten Probe mit einer Mikropipette in die (links) TEST-Kammer und anschließend 50 µL in die (rechte) KONTROLL-Kammer des Alethia™-Analysegefäßes.

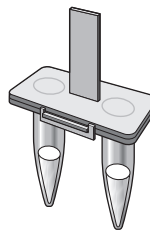

7. Schließen und sichern Sie den Riegel fest. Tippen Sie vorsichtig mit dem Finger an die zwei Kammern, um ggf. Luftblasen zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen in den Kammern befinden.



8. Setzen Sie das Alethia™-Testgerät in das Alethia™-Instrument ein und initiieren Sie die Amplifikationsreaktion und die Detektion.

 Diese Kurzanleitung repräsentiert die aktuelle Packungsbeilage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Bitte beziehen Sie sich auf die aktuellste Version der Packungsbeilage für eine vollständige Anleitung.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244, USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com

meridian BIOSCIENCE™